



Novo

Sistema de gestão hospitalar

Associação de monitores



Associação de monitores

Para associar monitores:

1. Selecione o paciente (“Lista de pacientes” ou “Carecompass”)
2. No Menu lateral, Clicar “Visualização interativa”
3. Selecionar a seção “Seção de Sinais vitais”
4. Clicar no Ícone de “Associar Dispositivo”
5. Pousar o mouse sobre a linha “Dispositivo”
6. Bipar o código de barras do monitor (Cabeceira do paciente)
7. Clicar “Enter” ou clicar na lupa (carrega o nome do monitor)
8. Selecionar a caixa box do monitor
9. Clicar em Associar
10. Visualiza o Monitor associado

Para recuperar dados retroativos

1. Clicar no Horário da associação
2. Ajustar o horário (até 24 horas retroativas)
3. Clicar em associar

Fechar a tela no canto superior direito

Manter o monitor fixado no leito, evitar transporte com o monitor beira leito



Selecionar o Paciente

Lista de pacientes: N07R 5 Bercario UTI

Localização	Paciente	Consulta	Atividades	Plano de tratamento
BU7 - BU03	Carla de Oliveira e Oliveira - Rn 1 5w 4d M -- Alergias --	Parto Estadia: 5w 4d	5 S/N / contínuo	1 plano sugerido 39 - RN Pré-termo Plano - Acompanh Plano - Fisioterapia
BU7 - BU05	Carla de Oliveira e Oliveira - Rn 2 5w 4d M -- Alergias --	Parto Estadia: 5w 4d	3 S/N / contínuo	1 plano sugerido 38 - RN Rotina Beracientes 39 - RN Pré-termo Plano - Acompanh Plano - Fisioterapia
BU7 - BU09	Isabel Pimenta Bueno - Rn 1 11d F -- Alergias --	Parto Estadia: 11d	3 S/N / contínuo	2 planos sugerido 38 - RN Rotina Ber Plano - Acompanh

Clicar na Seção Sinais Vitais

Teles Maia - Rn 1

5 Semana(s) Sexo: Masculino Peso Medicação: 1,04 kg

Médico: [nome não especificada] | Anemia não especifi... Precaução: Via Aérea Difícil: * Não documenta...
Local: MOR-D07 UTI-NEO; BU7; BU03 Convênio: One Health - One Health

Clicar na Visualização Interativa

Partograma

Doc Perioperatória

Gestão Administração Medicament...

Visualiz. Interativa/Bal. Hídrico

Prescrições + Adici...

Atividades / Intervenções

Alergias + Adici...

Históricos

Problemas e Diagnósticos

Notas

Formulários Preenchidos

Documentação + Adici...

Calendário de Vacinação

Revisão dos resultados

Resumo da Administração de Med...

Pesquisa Clínica

Informações do Paciente

- Visualização Rápida Neonatal
- Sinais Vitais
- Glicemia Capilar Enf
- Atividade Diária do Recém-Nascido
- Triagem Neonatal, Cardiopatia Congênite
- Infusões EV Contínuas
- Passagem de Plantão
- Consulta Enfermagem CEOB
- Trabalho de Parto
- Dados de Anestesia
- Recém-nascidos - Dados do Nascim...
- OB Recuperação e pós-parto
- Visualização Rápida - Maternidade
- Balanco Hídrico
- Acessos Drenos e Sondas
- Gestação Alto Risco
- Avaliação de Riscos
- Plano Educacional
- Administração de Hemocomponentes
- Cuidados em Amamentação - GAAM
- Terapia Respiratória

Sinais Vitais

15/mai/17

	11:39 BRT	10:46 BRT	08:15 BRT	07:00 BRT	05:00 BRT	03:30 BRT	03:00 BRT
Temperatura Axilar °C					36,7		
Temperatura da Pele							
Frequência cardíaca bpm	166	186 ↑	155 ↑				
Pulso Periférico resp/min					50		
Frequência Respiratória mm Hg							
PAS/PAD mm Hg		67/32 ↓					
PA Média mm Hg		44 !					
PAS/PAD Invasiva mm Hg							
SpO2 %	92	79 !	93	94			99
Local de SpO2					Pé esqu...	Pé direito	M
Cobrança oxigênio	Instalado oxigênio	Instalado ...					
Oxigenoterapia		CPAP	CPAP	CPAP	CPAP	CPAP	CP
Fluxo de O2 L/min		6	6	7	7	7	
FiO2 %		21	21	21	21	21	
Condução Após Saturação							
Sinais Vitais após a Atividade							
FC final bpm							

$\theta = Rn - 1$

Ressuscitação

22724575|Admissão: 06/

Peso Medicação:1,04 kg

Mèdic

Diagnóstico: Hemorragia intracerebral não esp

Data Prov. Alta:

Local:

Clicar no ícone “Associar dispositivo”

Visual. Interativa/Bal. Hídrico

Visualização Rápida N	Associar dispositivo
-----------------------	----------------------

Sinais Vitais

Glicemia Capilar Enf

Atividade Diária do Recém-Nascido

Triagem Neonatal, Cardiopatia Congênita

Infusões EV Contínuas

Passagem de Plantão

Consulta Enfermagem CEOB

Último(a) 24

Localizar item

Crítico

Alto(a)

Baixo(a)

Sinais Vitais

Temperatura Axilar



Temperatura da Pele

Device Association

Help

Natalia Pimentel Teles Maia - Rn 1 Nº do prontuário: 2020246 DdN: 5/13/2017 Sexo: Masculino

Equipamentos associados

☐ Selecionar tudo

Desassociar

Não existem dispositivos associados no momento.

Pesquisa de dispositivo

Dispositivo:

Escaneie ou insira um nome de dispositivo.

System Time: 5/15/2017 11:31 BRT User: acampos@prod.domhia.einstein.br Domain: pro

Bipar o Código de Barras do monitor

Nº do prontuário: 2020246 DdN: 5/13/2017 Sexo: Masculino

Desassociar

Não existem dispositivos associados no momento.

Pesquisa de dispositivo



Dispositivo:

Escaneie ou insira um nome de dispositivo.

Dispositivo: 24345-856-405-6777o-o-98==98685078605800

Dispositivo	Local	Detalhes	Fornecedor	Modelo
☐ B-09			PHLP	IntelliVue Series

Clicar Enter ou
Clicar na Lupa

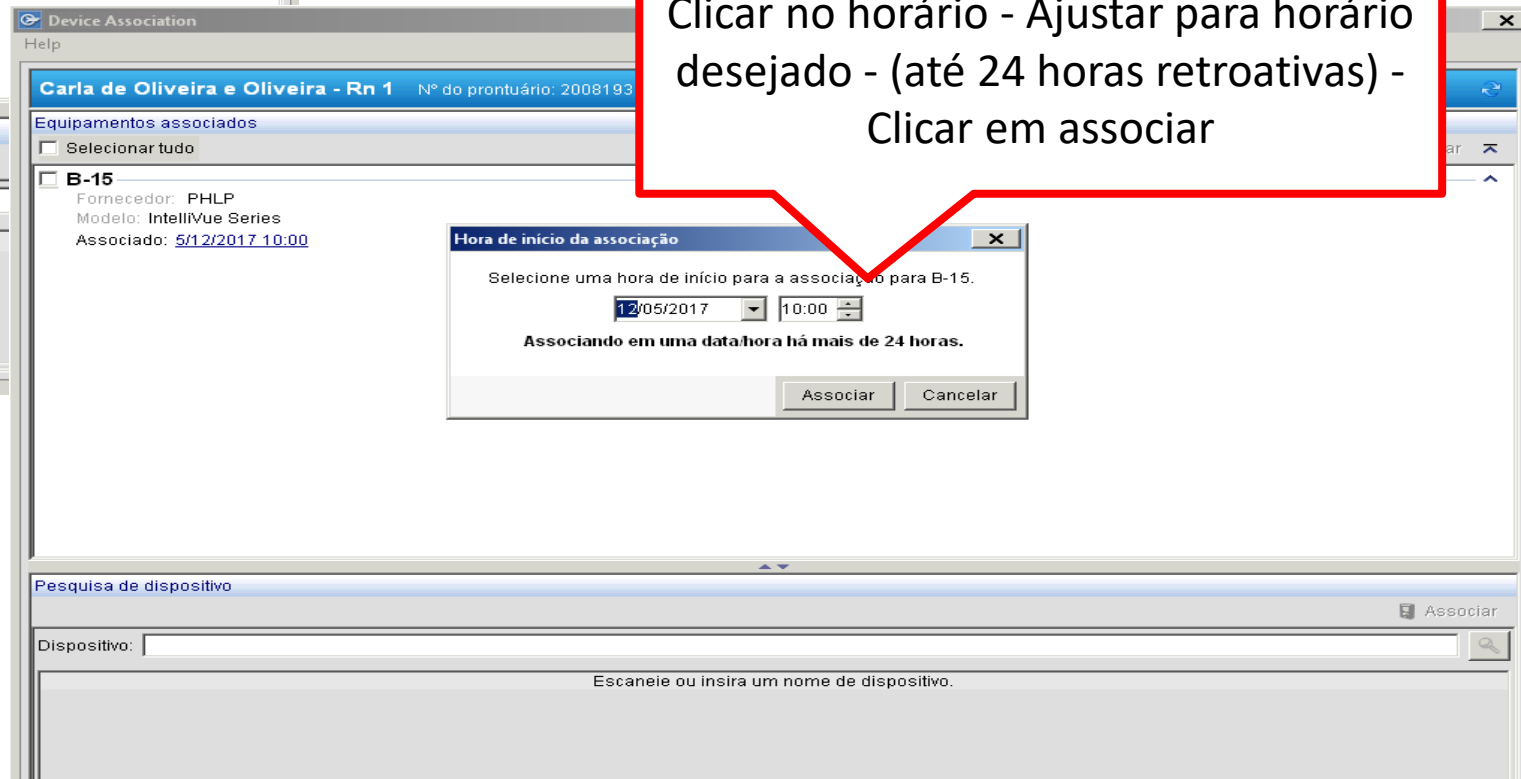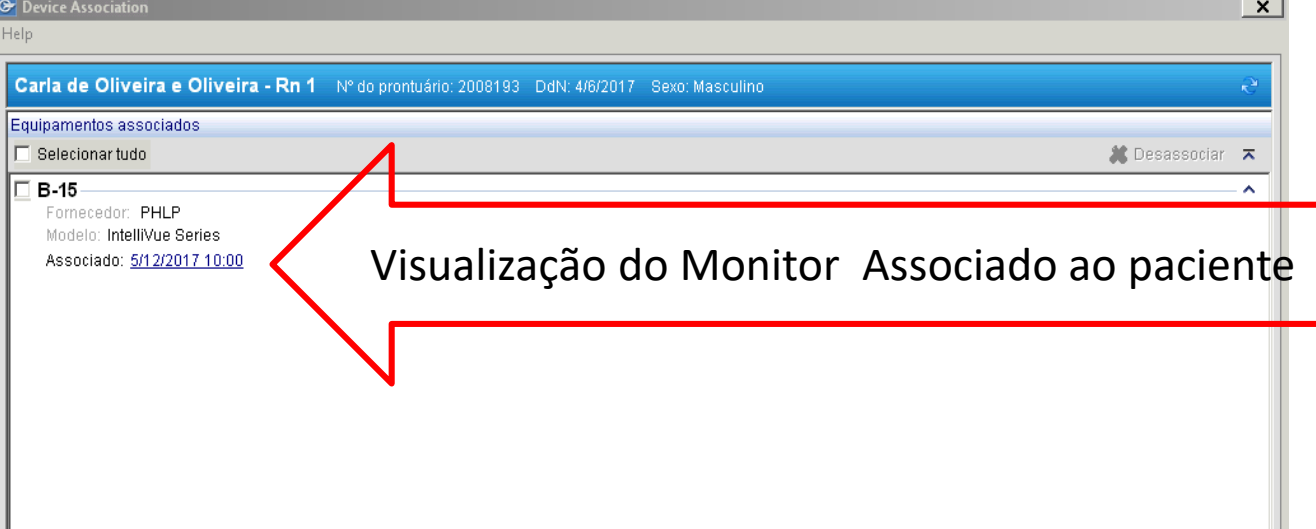

Para gravar os dados do monitor?
 Clicar duas vezes sobre linha **AZUL**

Os dados são carregados em "roxo" e devem ser validados

Visualização Rápida Neonatal		15/mai/17						
Sinais Vitais		11:00 BRT	10:46 BRT	08:15 BRT	07:00 BRT	05:00 BRT	03:30 BRT	03:00 BRT
Glicemia Capilar Enf								
Atividade Diária do Recém-Nascido								
Triagem Neonatal, Cardiopatia Congênita								
Infusões EV Contínuas								
Passagem de Plantão								
Consulta Enfermagem CEOB								
Tratamento								
Dados								
Rec								
OB								
Visu								
Bala								
Acessos Drenos e Sondas								
Gestação Alto Risco								
Avaliação de Riscos								
Plano Educacional								
Administração de Hemocomponentes								
Cuidados em Amamentação - GAAM								
Terapia Respiratória								

Sinais Vitais		11:00 BRT	10:46 BRT	08:15 BRT	07:00 BRT	05:00 BRT	03:30 BRT	03:00 BRT
Temperatura Axilar °C					36,7			3
Temperatura da Pele								
Frequência cardíaca bpm		166	186 ↑		155 ↑			17
Frequência Respiratória resp/min					50			
Pressão Arterial mm Hg			67/32 ↓					
Pressão Venosa Central mm Hg			44 !					
Saturação de O2 %		92	79 !	93	94		99	
Cobrança oxigênio					Pé esqu...	Pé direito		Mão
Oxigenoterapia			Instalado ...					
Fluxo de O2 L/min			CPAP	CPAP	CPAP	CPAP	CPAP	CPAI
FIO2 %			6	6	7	7	7	
Conduta Após Saturação			21	21	21	21	21	
Sinais Vitais após a Atividade								
FC final bpm								